


Dual VetXPL

赛德科兽医两用X光机

Dual VetXPL-4.0/Dual VetXPL-8.0

技术规格

最大功率	4kW/8kW
变频器频率	300 kHz
摄影管电压范围	40~110kVP, +1kVp/档位
摄影毫安范围	5~100mA, +25%/档位
摄影曝光时间	0.001~10秒, +25%/档位
摄影毫安秒范围	0.1~200 mAs, +25%/档位
焦斑	0.6/2.8 mm
阳极靶角	12°
最大输出电流 (100毫秒 60千伏)	100mA
电源线路规格; 电压范围	220~240 V (±10%); (50/60Hz) 16安培

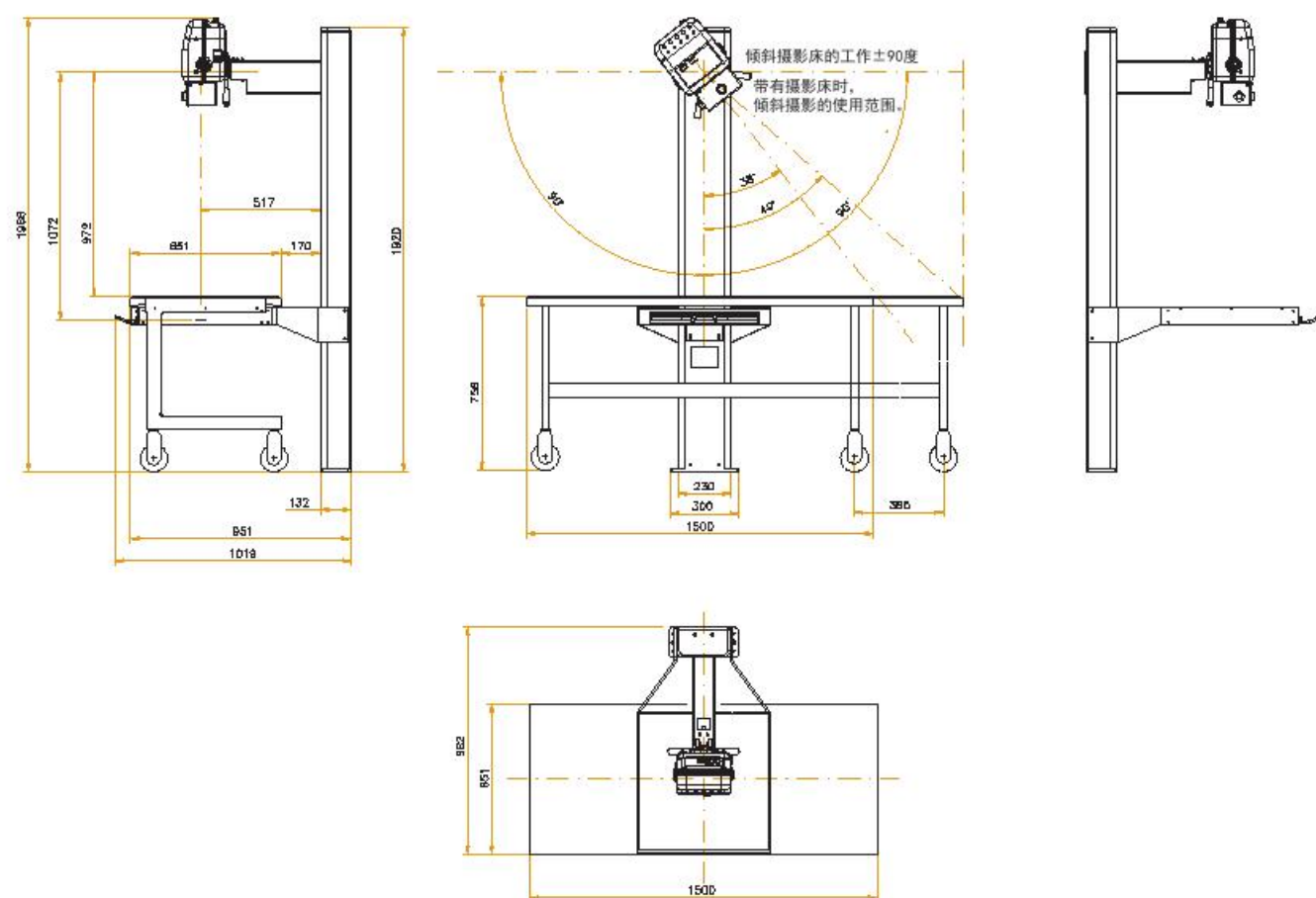

中国区总代理



北京中联保科技有限责任公司

地址: 北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A-803室
电话: +86-10-56421996 13701117999 13488685080
网址: www.bjccac.com QQ: 1091805875




8 kW, 300 kHz!

赛德科 兽医两用X光机



赛德科兽医两用X光机

Dual Vet

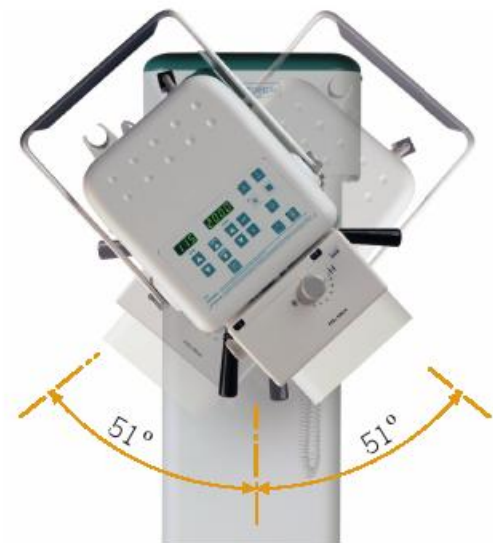

8 kW
300 kHz

强大功率

高达8.0kW的大功率输出，使之成为市场上输出功率最大的便携式X光机!!

在临床应用于任何宠物的X线摄影工作时，它能够比其他市面上的便携式X光机使用更短的曝光时间，从而避免了因宠物移动而造成的X线成像模糊。




固定和便携两用

真正的两用兽医X光机系统！把便携式X光机在户外拍摄检查的多功能性，和固定式X光机的所具有的强大功率和机械性能好，（带有固定立柱和活动范围大的可移动床台），做了很好的结合。



暗盒大小标示

在装暗盒的台上有暗盒大小的标示，便于使用者的定位。

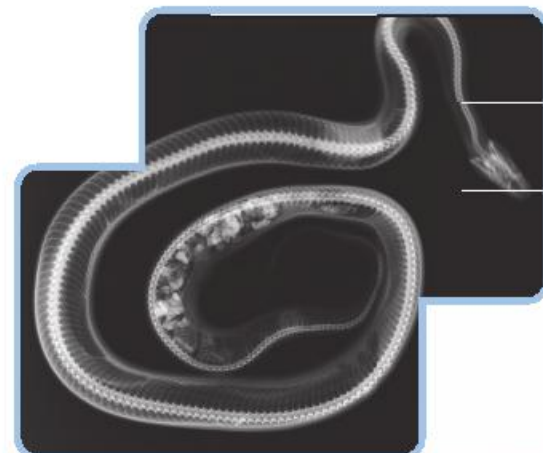

无工具拆卸

X光机器能够从立柱上轻易快速拆卸下来，不需要任何工具—只需把机器背后的锁柄旋转45°就可以把机器轻易地卸下来。



便携式

X光机移动箱能够很好的保护机器，并可以随意的把机器推到任何地方。在不同的环境下都能够拍摄检查。



新的手动开关，增加了一个遥控开关准直器的LED灯按钮。



带有20个体位摄影选择部位，摄影参数可以根据部位的不同而编辑、存储和调用，从而保证摄影条件的一致性，确保成像质量。

SEDECAL Vet